



Q300 M MINI JEST DLA WSZYSTKICH GRUP WIEKOWYCH!

Q300 M Mini łączy w sobie wysokowydajną podstawę z dedykowanymi systemami siedzisk dla dorosłych, nastolatków i dzieci, które spełniają Twoje potrzeby kliniczne. Teraz każdy może cieszyć się Q300 M Mini!

UNIWERSALNY ZAGŁÓWEK

Mocowanie zagłówka dla dorosłych, nastolatków i dzieci jest kompatybilne z zagłówkami SEDEO i WHITMYER, które pomagają zaspokoić szereg potrzeb, od podstawowego wsparcia po wielopunktową kontrolę.

SIEDZISKO SEDEO LITE

Łącząc regulowaną i konfigurowalną ramę z szerokim zakresem opcji podparcia i pozycjonowania, SEDEO LITE jest idealny dla klientów o łagodnych i umiarkowanych potrzebach wsparcia.

ODCHYLANE DO TYŁU PODŁOKIETNIKI

Po prostu odchyl podłokietniki do tyłu, aby uzyskać więcej miejsca podczas przesiadania się z wózka. Dostępne również w wersji wyjmowanej lub składanej.

KOMPENSUJĄCE DŁUGOŚĆ, ODCHYLANE PODNÓŻKI

Łatwo regulowana długość w celu uzyskania najlepszego możliwego dopasowania, te podnóżki można odchyłać, aby ułatwić przesiadanie się z wózka. Dostępny również elektryczny mocowany centralnie podnózek.

DLA KLIENTÓW Z
ŁAGODNYMI DO
UMIARKOWANYCH
POTRZEB
KLINICZNYCH

TAPICERKA OPARCIA Z KOMFORTOWĄ PODUSZKĄ

Standardowe oparcie z regulacją wysokości zapewnia oddychającą, miękką tapicerkę z 4 regulowanymi paskami, aby dostosować się do różnych pozycji. Zmień oparcie i poduszkę na SEDEO lub JAY, aby zwiększyć komfort i pozycjonowanie.



Zeskanuj kod QR aparatem w telefonie, aby dowiedzieć się więcej.



TECHNOLOGIA SZYN SIEDZISKA

Zintegrowana szyna siedziska oferuje wiele możliwości montażu elementów pozycjonujących, takich jak boczne podparcie klatki piersiowej, ud i kolan. Po prostu zamocuj i wsuń na miejsce!



SIEDZISKO SEDEO PRO

DLA KLIENTÓW Z
UMIARKOWANYM
DO SKOMPLIKOWANYCH
POTRZEB KLINICZNYCH

Wysokiej klasy w pełni regulowana i konfigurowalna rama siedziska z najszerszą gamą opcji i akcesoriów do pozycjonowania: SEDEO PRO oferuje dużą elastyczność w dostosowywaniu się do indywidualnych potrzeb użytkownika, który ma choroby zwyrodnieniowe lub potrzebuje zabezpieczenia przed wystąpieniem deformacji szkieletu o umiarkowanych lub złożonych potrzebach klinicznych.



50° ELEKTRYCZNE PRZECYCHANIE NAWET W POŁĄCZENIU Z PODNOSZENIEM SIEDZISKA

Pozwala ocenić obszary, które były poza zasięgiem, jednocześnie pomagając zmniejszyć ryzyko powstania odleżyn, pomagając w utrzymaniu prawidłowej postawy i zapewniając wygodę użytkownika.



ELEKTRYCZNIE ODCHYLANE OPARCIE 90°/150°

Pomaga w oddychaniu i zapobiega odleżynom i powikłaniom trawiennym. Pomaga utrzymać dobrą postawę siedzącą podczas odchylenia oparcia.

OPARCIE Z SYSTEMEM ANTI-SHEAR

100 mm ruchu Anti-Shear zapewnia, że nie ma poślizgu między użytkownikiem a poduszką, zapewniając wygodne odchylenie.

POZYCJA RELAKS (DOSTĘPNA WKRÓTCE)

Pozwala na jednoczesną regulację pochylenia siedziska i odchylenia oparcia oraz utrzymuje zagłówek na miejscu podczas zmiany pozycji.



Zeskanuj kod QR aparatem
w telefonie, aby dowiedzieć
się więcej.

ELASTYCZNA PODUSZKA OPARCIA SEDEO PRO

Zmień na tą wyjątkową poduszkę oparcia, która łączy regulowane, pełne tylne i boczne podparcie tułowia z najwyższym poziomem zanurzenia, który trzeba poczuć, aby w to uwierzyć!

DOPASOWUJE SIĘ DO KRĘGOSŁUPA

Zamiast sztywnej podstawy, elastyczna poduszka pod plecy ma 8 regulowanych pasków, które owijają się wokół pleców. Tam, gdzie inne oparcia mają ograniczony kontakt z kręgosłupem, warstwa elastycznej poduszki oparcia z miękkiej pianki dopasowuje się do Ciebie, zapewniając pełny kontakt, wygodę i stabilność.

Jest tak wciągająca, że nawet osoby z umiarkowaną lub ciężką postawą kifotyczną mogą siedzieć znacznie bardziej wyprostowane bez poświęcania komfortu.



Zeskanuj kod QR za pomocą aparatu w telefonie, aby obejrzeć wideo.

OWIJA SIĘ I FORMUJE DO TWOJEGO CIAŁA

Kiedy siadasz, boki oparcia „przytulają” Twoje boki, pozwalając wciągającej pianie dopasować się do twoich anatomicznych krzywizn.

Ponieważ więcej ciała ma kontakt z poduszką, nacisk rozkłada się lepiej, zapobiegając dyskomfortowi lub zwiększonemu uciskowi.

Stabilność i wyrównanie tułowia zapewniają boczne podpory. Zintegrowane z wewnętrzną częścią oparcia dla uzyskania gładkiego i atrakcyjnego wyglądu, nie przesuwają się ani nie zsuwają z upływem czasu. Niezależnie regulowane podpory mogą być:

1

Umieszczone do wewnątrz lub na zewnątrz

2

Przesuwane w górę lub w dół

3

Zablokowane, aby wspierać postawy takie jak skolioza lub poluzowane dla większej swobody



zippie

Q300 M MINI kids

DZIECIĘCY REGULOWANY SYSTEM SIEDZISKA

Dzieci rosną tak szybko, podobnie jak ich Q300 M Mini Kids! Ten system siedzisk może rosnąć na szerokość (280 - 400 mm) i głębokość (260 - 400 mm), więc nie ma konieczności do przesiadki na nowy wózek, gdy Twoje dziecko dorośnie - wystarczy przekonfigurować obecny!



OPARCIE SEDEO LITE

Zaprojektowaliśmy to oparcie tylko dla dzieci. Wyprofilowane dla wygody, zintegrowane boki zapewniają stałą stabilność tułowia. Ponieważ znajdują się wewnątrz oparcia, boki nie będą się z czasem przesuwają ani ślizgać - idealne dla dzieci w ruchu! A osiem regulowanych pasków zapewnia zindywidualizowane wsparcie w każdym miejscu.



DODATKOWE FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA

To poręczne urządzenie natychmiast zdalnie zatrzymuje wózek Twojego dziecka, jeśli oddali się trochę za daleko, by zapewnić mu komfort.

Zeskanuj kod QR za pomocą aparatu w telefonie aby obejrzeć wideo.



Q300 M MINI TEENS

MŁODZIEŻOWY REGULOWANY SYSTEM SIEDZISKA

Wyposażony we wszystkie możliwości regulacji wzrostu i funkcje wersji dla dzieci, Q300 M Mini Teens rozciąga się do rozszerzonego zakresu głębokości siedziska 360 - 500 mm. Idealny dla rosnących nastolatków, którzy wymagają małej szerokości siedziska, ale z czasem większej regulacji głębokości siedziska.



MOCOWANIE JOYSTICKA TYPU CAPSULATED

To (opcjonalne) mocowanie joysticka ma 3 pozycje blokowania. Można go zamontować w linii środkowej dla dzieci, które mają ograniczoną ruchomość rąk, a także odchylać do wewnątrz/na zewnątrz, aby pomóc zbliżyć się do stolików.



PODNÓŻKI Z SYSTEMEM Z-FINITY

Regulowane od 160 do 480 mm poniżej płyty siedziska, te podnóżki zapewniają wsparcie, którego potrzebują rosnące dzieci. Bezstopniowa regulacja wzdłuż łuku obrotowego, można uzyskać wiele kątów i opcji ułożenia stóp, kostek i kolan.



Połącz się ze swoim światem*
Bezproblemowo przejmij kontrolę nad swoim środowiskiem za pomocą zintegrowanej funkcji Bluetooth i i-device. Steruj telewizorem, telefonem i innymi systemami rozrywki domowej za pomocą joysticka.



Zeskanuj kod QR za pomocą aparatu w telefonie, aby obejrzeć video.



*Dostępny tylko z R-Net

JAY I WHITMYER

OPCJE POZYCJONOWANIA

Szeroka gama zagłówków WHITMYER oraz poduszek i oparc JAY jest dostępna z SEDEO LITE, SEDEO PRO, a także z siedziskami Kids i Teens, aby sprostać potrzebom klinicznym każdego użytkownika i zapewnić najlepszą możliwą pozycję siedzenia.



ZAGŁÓWKI WHITMYER

Stworzony w celu zaspokojenia szeregu potrzeb użytkowników, od podstawowego po wielopunktowe podparcie. Zagłówki WHITMYER są dostępne w różnych kształtach i rozmiarach poduszek, co zapewnia doskonałe ułożenie głowy i wygodę.

PODUSZKI I OPARCIA JAY

Zaprojektowane z myślą o stabilności miednicy, ochronie skóry i komforcie, poduszki i oparcia JAY są łatwe w utrzymaniu, wysoce konfigurowalne i dostępne w szerokiej gamie, aby spełnić Twoje indywidualne potrzeby.



R-NET

JOYSTICK ZAAWANSOWANY

Każdy Q300 M Mini jest opcjonalnie wyposażony w zaawansowany joystick R-Net. Duży, czytelny wyświetlacz HD oraz proste w obsłudze przełączniki łopatkowe pozwalają na intuicyjną obsługę.

ŁĄCZNOŚĆ IR

Bezproblemowo przejmij kontrolę nad swoim środowiskiem za pomocą zintegrowanej funkcji podczerwieni. Steruj swoim domowym systemem rozrywki, telewizorami, odtwarzaczami DVD, stacjami dokującymi i innymi domowymi systemami rozrywki za pomocą joysticka.

ŁĄCZNOŚĆ BLUETOOTH

Steruj telefonem, komputerem, tabletem i innymi urządzeniami Bluetooth oraz i-urządzeniami za pomocą tego przydatnego dodatku. Podłącz i steruj maksymalnie czterema urządzeniami.

OPATENTOWANE PRZYCISKI QUICKIE Z MOŻLIWOŚCIĄ PROGRAMOWANIA

Zmień funkcję dowolnego przycisku na joysticku na dowolne polecenie, dzięki OPATENTOWANYM przyciskom programowalnym QUICKIE. Możesz także przypisać drugą funkcję (długie naciśnięcie) do przycisków, zapewniając szybszy, prostszy i płynniejszy dostęp do często używanych funkcji bez konieczności używania joysticka.



SWITCH-IT

INNOWACYJNE STEROWANIE


Wygodny dostęp do 5 programowalnych pozycji za pomocą Ctrl+5 – idealne połączenie z funkcją Memory Seating. Pozwala przejść bezpośrednio do potrzebnej funkcji za naciśnięciem jednego przycisku.

ALTERNATYWNE STEROWANIE NAPĘDEM

Jeśli jazda za pomocą tradycyjnego joysticka nie jest najlepszą opcją, alternatywne sterowanie napędem pozwoli Ci w pełni doświadczyć możliwości i korzyści płynących z prowadzenia Twojego wózka.



Zeskanuj kod QR za pomocą aparatu w telefonie, aby dowiedzieć się więcej.

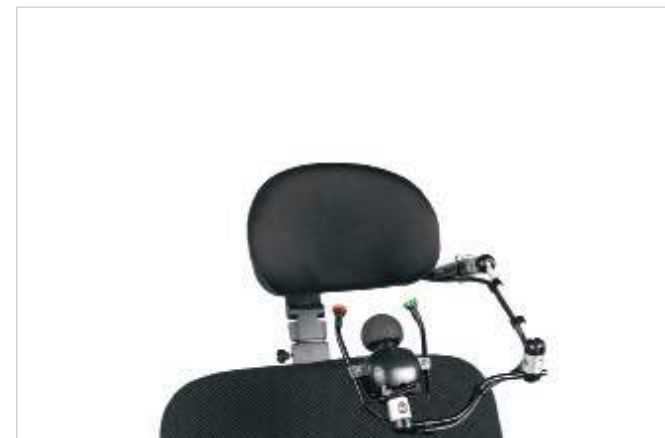

LINK-IT

SYSTEM MOCOWANIA

Potrzebujesz użyć dodatkowych przycisków lub specjalnych elementów sterujących? Żaden problem, z łatwością podłącz je za pomocą uniwersalnego systemu montażowego Link-It.

Korzystając z kombinacji dostępnych modułów i rurek, możesz stworzyć nieskończoną liczbę kombinacji, aby osiągnąć to, czego potrzebujesz. Nie tylko łatwo go ustawić, ale Link-It zapewnia również, że minimalistyczny projekt wózka nie zostanie naruszony przez dodatkowe elementy sterujące. Niezależnie od tego, czy jest to dodatkowy kontroler na podłokietniku, przycisk na oparciu, czy przełącznik na zagłówku, wystarczy go połączyć.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA



SPECYFIKACJA SIEDZISK



Q300 M Mini z
SEDEO LITE



Q300 M Mini z
SEDEO PRO

Wymiary

Szerokość siedziska	385 - 510 mm	380 - 560 mm
Głębokość siedziska	410 - 560 mm	400 - 560 mm
Wysokość siedziska od podłoża	410 - 490 mm	410 - 490 mm
Stały kąt nachylenia siedziska	0 - 9°	0 - 9°
Wysokość oparcia	460 - 510 mm	530 - 720 mm
Kąt oparcia	85 - 120°	90° - 150°
Maksymalna waga użytkownika	136 kg	136 kg

Fukcje

Rodzaj siedziska	SEDEO LITE	SEDEO PRO
SEDEO PRO Flexible Back Cushion	●	●
Oparcie dla dorosłych SEDEO LITE	●	-
Oparcie dla dzieci SEDEO LITE	-	-
Elektrycznie odchylane oparcie	●	●
Elektrycznie podnoszone i wydłużane podnóżki	●	●
Zdalny przycisk STOP	●	-
C-Me	●	●
Podnózek z systemem Z-Finity	-	-

● Dostępne



Q300 M Mini Teens



Q300 M Mini Kids

300 - 400 mm	280 - 400 mm
360 - 500 mm	260 - 400 mm
410 - 490 mm	410 - 490 mm
0 - 9°	0 - 9°
435 - 535 mm	380 - 485 mm
86 - 106°	86 - 120°
120 kg	75 kg
Siedzisko Teens	Siedzisko Kids
-	-
-	-
●	●
-	●
●	-
●	●
●	●
●	●

SPECYFIKACJA PODSTAWY JEZDNEJ

Wymiary	
Szerokość całkowita	od 520 mm
Długość całkowita (z centralnie mocowanym podnóżkiem)	od 1060 mm
Promień skrętu	od 1120 mm
Maksymalny bezpieczny kąt podjazdu	8°
Maksymalna wysokość krawężnika	50 mm (z kołem napędowym 12") 60 mm (z kołem napędowym 13") 70 mm (z kołem napędowym 14")
Maksymalny zasięg (ISO 7176-4)	do 25 km (z akumulatorami 41 Ah) do 36 km (z akumulatorami 56 Ah)
Waga produktu (z akumulatorami)	od 103 kg
Koła napędowe	12" / 13" / 14"
Maksymalna prędkość	6 km/h / 8 km/h / 10 km/h
Akumulatory	41 Ah / 50 Ah / 56 Ah
Elektronika	VR2, R-NET
Transport bez użytkownika	Zamocuj bezpiecznie wózek w pojeździe (np. samochodzie lub samolocie).
Przeznaczenie i środowisko	Dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, do użytku wewnątrz i na zewnątrz. Typ wózka - klasa B

SZUKASZ CZEGOŚ WYJĄTKOWEGO?



Dział BUILT-4-ME stworzył tysiące wózków na indywidualne zamówienie. Jeśli chcesz przełamać schematy, pomożemy Ci stworzyć naprawdę jedyny w swoim rodzaju wózek. Dowiedz się więcej na:

www.sunrisemedical.eu/built4me

Teraz, gdy przeczytałeś już wszystko o QUICKIE Q300 M Mini, uważamy, że nadszedł czas, abyś sam tego doświadczył.



Zeskanuj kod QR za pomocą aparatu w telefonie i już dziś zarezerwuj bezpłatną jazdę próbną.



Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.
ul. Elektronowa 6
94-103 Łódź
Tel.: +48 42 275 83 38
Fax: +48 42 209 36 67
E-Mail: pl@sunrisemedical.pl
www.Sunrise-Medical.pl



Sunrise Medical dba o Twoje bezpieczeństwo. Przeczytaj instrukcję obsługi, aby uzyskać instrukcje dotyczące bezpiecznej obsługi i konserwacji.

Zgodnie z naszą polityką ciągłego doskonalenia produktów Sunrise Medical zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnym momencie i bez powiadomienia. Aby uzyskać najnowsze informacje, odwiedź stronę www.sunrise-medical.pl. Osoby niedowidzące mogą zapoznać się z tym dokumentem w formacie PDF na stronie www.Sunrise-Medical.pl.